

Rasoi elettrici per tricotomia CareFusion

Un nuovo standard nella
tricotomia pre-operatoria



CareFusion

Introduzione

Il nuovo rasoio elettrico per tricotomia pre-operatoria CareFusion rimuove rapidamente i peli in un unico passaggio riducendo il rischio d'irritazioni cutanee e d'infezioni rispetto a un rasoio tradizionale.¹⁻⁶ Abbiamo consultato il personale medico e incorporato le caratteristiche che ci hanno raccomandato per creare un modello durevole, facile da utilizzare e da pulire, con un lungo ciclo di vita e di funzionamento.

La versatilità, l'igiene, e le prestazioni dei rasoi elettrici per tricotomia CareFusion li rendono adatti per ogni reparto della vostra struttura ospedaliera.



CareFusion



WET/DRY





Gli effetti dei rasoi elettrici per tricotomia (clipper) verso i metodi di rasatura tradizionale (rasoi con lamette)

Negli studi in cui sono state messe in atto diverse iniziative atte a prevenire le infezioni, tra cui la sostituzione dei rasoi tradizionali con i rasoi elettrici per tricotomia (Clipper), i tassi di infezione si sono ridotti.[†]


Studi	Rasoio	Clipper
Liau ¹ (2010)	3.1%	0.5%
Graf ² (2009)	3.6%	1.8%
Trussell ³ (2008)	3.5%	1.5%
Dellinger ⁴ (2005)	2.3%	1.7%
Alexander ⁵ (1983)	6.4%	1.8%
Ko ⁶ (1992)	1.31%	0.6%

[†]Basato sui risultati del metodo di rasatura effettuata il mattino dell'intervento. Questo metodo di rasatura al mattino con il rasoio elettrico (clipper) è associato ad una riduzione significativa delle infezioni rispetto agli altri metodi; la valutazione è stata fatta sia in dimissione che a distanza di 30 giorni.

Rasoio tradizionale (cute dopo la rimozione dei peli)



Rasoio elettrico per tricotomia CareFusion (cute dopo la rimozione dei peli)

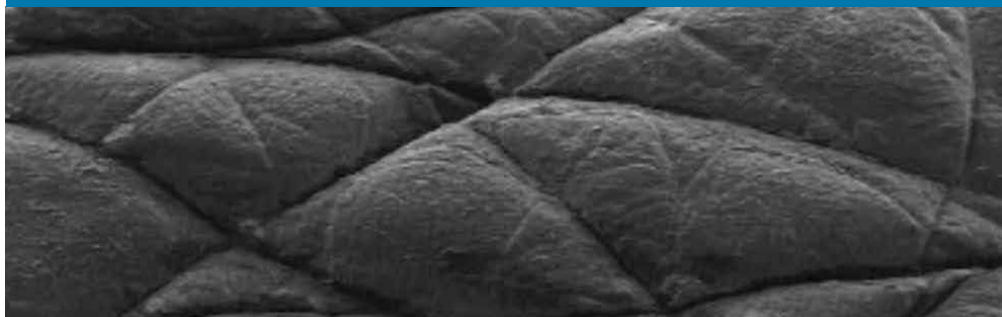

Raccomandato dalle associazioni sanitarie

Le più rilevanti organizzazioni sanitarie hanno raccomandato agli ospedali l'utilizzo dei rasoi elettrici per tricotomia invece dei rasoi tradizionali quando la rimozione dei peli pre-operatoria si rende necessaria:

Linee guida americane:

- Centers for Disease Control and Prevention (CDC)⁷
- Association of Perioperative Registered Nurses (AORN)⁸
- The Institute of Healthcare Improvement⁹
- The Surgical Care Improvement Project¹⁰
- The U.S. Department of Health and Human Services (HHS)^{11,12}

Linee guida internazionali:

- Saving Lives: High Impact Intervention No. 4¹³
- National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)¹⁴
- Association for Perioperative Practice (AFPP)¹⁵
- Safer Healthcare Now¹⁶



I nuovi rasoi elettrici per tricotomia CareFusion

I nuovi rasoi elettrici per tricotomia CareFusion impostano un nuovo standard nella tricotomia pre-operatoria, grazie a:

Versatilità

- Un' unica impugnatura con lame facili da cambiare che rendono il rasoio elettrico per tricotomia CareFusion ideale per ogni reparto della vostra struttura ospedaliera.

Igiene

- La completa immergibilità assicura una pulizia e disinfezione accurata.

Prestazioni

- La capacità di taglio, la prossimità di taglio e le lame specifiche per ogni tipo di pelo consentono di rimuovere i peli in un unico passaggio.

Sicurezza

- Le principali organizzazioni sanitarie raccomandano l'utilizzo del rasoio elettrico per tricotomia rispetto ai rasoi tradizionali per aiutare a ridurre il rischio di infezioni.

Ergonomia

- Un' impugnatura ergonomica a 40° permette un uso più intuitivo per una rasatura senza problemi in un unico passaggio
- La tecnologia migliorata del bottone di accensione semplifica l'utilizzo e ne facilita la pulizia.

Materiali durevoli

- I durevoli materiali esterni migliorano la compatibilità con i disinfettanti usati più comunemente e la nuova garanzia di due anni assicura la longevità dello strumento.^{17*}

Tecnologia ad efficienza energetica

- La tecnologia della batteria a ioni di litio conferisce una durata di carica più lunga e migliora l'efficienza energetica
- L'indicatore della durata della batteria allerta il personale medico quando ricaricare l'unità
- L'indicatore di carica indica quando l'unità è completamente carica.**

Istruzioni d'uso

Seguire questi passi per un appropriato uso dei rasoi elettrici per tricotomia e lo smaltimento di tutte le lame.

Primo Passo : Inserire la lama

Indossando i guanti, collocare una nuova lama sulla testina del rasoio, allineando il punto segnato su un lato della lama con la freccia presente sull'impugnatura. Far scivolare la lama indietro fino ad allineare il marchio sulla lama con la freccia presente sull'impugnatura e fino a sentire un click per assicurarsi che la lama sia ben sistemata.

Secondo passo: Procedere con la tricotomia

Impugnare il rasoio come una penna con il logo CareFusion rivolto verso l'alto. Distendere la cute, posare la lama piatta sulla pelle e radere i peli in senso contrario a quello di crescita.

Terzo passo : Rimuovere la lama

Spegnere il rasoio, porre la lama del rasoio rivolta verso il basso sopra ad un contenitore apposito per oggetti appuntiti e taglienti e utilizzare il pollice per spingere la lama in avanti lungo la struttura della lama.

Quarto passo: Pulire l'impugnatura del rasoio

Lavare l'impugnatura del rasoio accuratamente con acqua e sapone, e poi strofinare il dispositivo con un disinfettante per superfici o immergere l'impugnatura in un agente antimicrobico.*

Quinto passo: Ricaricare e stoccare

Collocare l'impugnatura del rasoio in posizione verticale nell'adattatore di ricarica per assicurare che sia carico per il trattamento successivo.

La luce arancione cesserà di essere illuminata quando l'unità sarà totalmente carica.



Consigli per la tricotomia

Seguite queste istruzioni per una tricotomia efficace:

- Inumidire i peli/capelli da radere quando possibile per prevenire la dispersione di peli/capelli o cellule del tessuto cutaneo, che possono contaminare il sito chirurgico.
- Distendere la cute con una mano mentre si procede alla tricotomia con l'altra mano, in modo da assicurare una superficie piana quando si rade. Questo è particolarmente importante quando si procede alla rasatura di tessuti molli.

Da non fare

- Non cambiare angolo o inclinare eccessivamente la lama, nel tentativo di ottenere una rasatura più ravvicinata. Tenere sempre la base della lama, del rasoio piatta sulla cute del paziente.
- Non utilizzare una presa dall'alto, questo fornisce meno accuratezza e controllo. Mantenere una presa costante sull'impugnatura.
- Non tirare il rasoio verso di sé sulla pelle del paziente e non applicare mai più forza del necessario. Muovere sempre il rasoio allontanandolo dal proprio corpo con una leggera spinta.

Informazioni per ordinare

No. Cat.	Descrizione	Quantità
5513E	Rasoio per tricotomia ricaricabile	1
5514E	Adattatore di ricarica	1
4406	Lama Universale	50
4412A	Lama Neuro	20
4403A	Lama SensiClip®	20



Per maggiori informazioni visitare il sito carefusion.com


* I rasoi per tricotomia CareFusion possono essere puliti con la maggioranza degli agenti antimicrobici a base alcolica o diluiti in acidi/basi. Disinfettanti che contengono alcol benzilico possono causare danni chimici alla superficie esterna dell'impugnatura del rasoio o del carica batterie. Questo può annullare la garanzia dell'apparecchio. L'immersione del rasoio non può eccedere un metro di profondità per non più di 30 minuti

** E' raccomandato che il personale clinico stacchi la ricarica dalla presa quando la luce arancione costante non è più illuminata, indicando che l'apparecchio è completamente carico.

Bibliografia

1 Liau, KH., Aung, KT., Chua, N., Ho, CK., et al. Outcome of a strategy to reduce surgical site infection in a tertiary-care hospital. *Surg Infect*, November 2010, 11(2):151-159. 2 Graf K., Sohr D., Haverich A., Kühn C., et al. Decrease of deep sternal surgical site infection rates after cardiac surgery by a comprehensive infection control program. *Interact Cardiovasc Thorac Surg*, August 2009, 9(2):282-286. 3 Trussell J., Gerkin R., Coates B., Brandenberger J., et al. Impact of patient care pathway protocol on surgical site infection rates in cardiothoracic surgery patients. *Am J Surg*, December 2008, 196(6):883-889. 4 Dellinger, EP., Hausmann, SM., Bratzler, DW., Johnson RM., et al. Hospitals collaborate to decrease surgical site infections. *Am J Surg*, July 2005, 190(1):9-15. 5 Alexander JW, et al. The Influence of hair-removal methods on wound infection. *Arch Surg*. 1983;118(3):347-352. 6 Ko, W., Lazenby, WD., Zelano, IA., Isom, OW., et al. Effectives of shaving methods and intraoperative irrigation on suppurative mediastinitis after bypass operations. *Ann Thorac Surg*, February 1992, 53(2):301-305. 7 Guideline for Prevention of Surgical Site Infection, 1999. Centers for Disease Control and Prevention. Retrieved April 9, 2013, from http://www.cdc.gov/hicap/SSI/004_SSI.html. 8 Association of Perioperative Registered Nurses. Recommended Practices for Perioperative Patient Skin Antisepsis. 2011 Perioperative Standards and Recommended Practices. 9 The Institute for Healthcare Improvement. 100,000 Lives Campaign, Getting Started Kit: Prevent Surgical Site Infections. 2013. <http://www.ih.org/NR/rdonlyres/00EBAF1F-A29F-4822-ABCE-829573255AB8/0/SSIHowtoGuideFINAL0803.pdf>. 10 The Surgical Care Improvement Project: Percent of surgery patients with appropriate hair removal. http://www.qualitymeasures.ahrq.gov/summary/summary.aspx?ss=1&doc_id=14900. 11 U.S. Department of Health and Human Services. The Surgical Care Improvement Project: Percent of surgery patients with appropriate hair removal. 2013. http://www.qualitymeasures.ahrq.gov/summary/summary.aspx?ss=1&doc_id=14900. 12 U.S. Department of Health and Human Services. HHS Action Plan to Prevent Healthcare-Associated Infections. 2013. http://www.hhs.gov/ash/initiatives/hai/actionplan/hhs_hai_action_plan_final_06222009.pdf. 13 Clean, Safe Care. High Impact Intervention No. 4: Care bundle to prevent surgical site infection. <http://www.sussexrctcare.nhs.uk/profclinical/carebundles/documents/DH-4Carebundletopreventsurgicalsiteinfection.pdf>. 14 National Institute for Health and Clinical Excellence: Prevention and Treatment of Surgical Site Infections, Clinical Guidelines, October 2008. 15 Association for Perioperative Practice (AfPP). Time Out poster. February 2009. <http://www.afpp.org.uk/filegrab/TimeOutPosterFeb09.pdf?ref=973>. 16 Safer Healthcare Now! Getting Started Kit: Prevent Surgical Site Infections. Canadian Patient Safety Institute. 2010:16-17. from www.saferhealthcarenow.ca. 17. Dossier Tecnico PF-IP-03

CareFusion Italia 311 S.r.l
Via Ticino 4
50019 Sesto Fiorentino
Firenze
Italia
Telefono: 055.303391
Fax: 055.340025
customer.service-italy@carefusion.com

 CareFusion France 309 S.A.S.
8 bis rue de la Renaissance,
44110 Châteaubriant, France

Il rasoio elettrico per tricotomia e tutti i relativi accessori sono dispositivi medici di classe I marchiati CE in conformità con la Direttiva sui dispositivi medici 93/42/EC

Leggere le istruzioni d'uso complete fornite con il dispositivo.

© 2014 CareFusion Corporation o una delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati. SensiClip, CareFusion e il logo CareFusion sono marchi o marchi registrati di CareFusion corporation o una delle sue affiliate. 0000CF02025 Versione 1.
Date de préparation : Février 2014 Version 1



CareFusion