



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS


**CINGHIE MONITOR FETALE RIUTILIZZABILI**  
**REUSABLE FOETAL TRANSDUCER BELTS**  
**SANGLES RÉUTILISABLES POUR TRANSDUCTEUR FOETAL**  
**CORREAS PACIENTE INDIVIDUAL PARA SONDA FETAL**  
**CORREIA FETAL TRANSDUTORA REUTILIZÁVEL**  
**EINWEG-GÜRTEL FÜR FETALEN SCHALLKOPF**  
**ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΖΩΝΗ ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΑ**  
**ΕΜΒΡΥΪΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**  
**EENMALIGE FOETALE TRANSDUCER RIEM**  
**PASEK PRZETWORNIKA PŁODU DO WIELOKROTNEGO**  
**UŻYTKU**  
**CUREA ABDOMINALĂ PENTRU MONITORIZARE FETALĂ,**  
**REFOLOSIBILĂ**  
**ÅTERANVÄNDBART FOSTERGIVAREBÄLTE**

**REF B08 (GIMA 29545)**

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Hersteller /  
Κατασκευαστής / Fabrikant / Producent / Producător / Tillverkare:  
Dongguan Belcare Medical Technology Co., Ltd.  
503 of 2nd. Block, #2 of Shaping Road, Tangxia Town,  
Dongguan, Guangdong, China 523710 - joe@belcare-med.com  
Made in China

Importato da/Imported by/ Importé par/ Importiert von/ Importado  
por/ Importado por/ Εισάγεται από/ Geïmporteerd door /  
Importowane przez / Importat de / Importerad av:  
Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

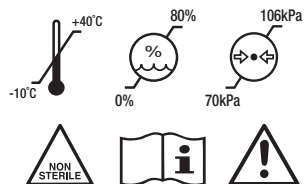

**Uso previsto:**

- Questo prodotto funziona in base alla regolazione della posizione della fibbia sulla cintura per fissare il trasduttore fetale.

**Introduzione al prodotto:**

- Nome del prodotto: Cintura riutilizzabile con trasduttore fetale
- Struttura del prodotto: È composto da una cintura elastica e da una fibbia.

**Gamma di prodotti:**

- Viene utilizzato con il trasduttore fetale in gravidanza nel monitoraggio fetale, per fissare il trasduttore fetale.

**Condizione d'uso:**

- Temperatura: 0°C~40°C
- Umidità relativa: 15%~95%
- Pressione atmosferica: 70kpa~106kpa

**Confezione e conservazione:**

- La cintura fetale deve essere confezionata in un unico imballaggio; il prodotto confezionato deve essere conservato in un locale non corrosivo e con una buona ventilazione.

**Conservare l'ambiente come indicato di seguito:**

- Temperatura: -10°C~+40°C
- Umidità relativa: ≤80%
- Pressione atmosferica: 70kpa~106kpa

**Installazione/utilizzo:**

- Fissare un'estremità della cintura al trasduttore inserendo uno dei fori della cintura sul pulsante in cima al trasduttore.
- Mantenendo il trasduttore in posizione, tendere l'altra estremità della cintura e agganciarla al

pulsante, assicurando una tensione sufficiente a mantenere il trasduttore in contatto con l'addome.

- Evitare di stringere eccessivamente per non creare inutili disagi al paziente.

**Prodotto pulito:**

- Lavare la cintura in acqua tiepida, non strofinare il bordo della cintura fetale per evitare la rimozione, non esporla.

**Periodo di validità:**

- Periodo di validità: 2 anni.

**Sostituire e abbandonare:**

- Sostituire: In queste situazioni, come fratture, danni elastici, data di scadenza, sostituire la cintura fetale con una nuova.
- Abbandono: Il nastro abbandonato può essere trattato come un normale rifiuto.

**Controindicazioni, precauzioni, avvertenze e consigli di prudenza:**

- Controindicazioni: Le cinture non devono essere fissate nel punto della lesione.
- Allergie allo spandex da smettere di usare.
- Leggere le istruzioni prima dell'uso.

**CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA**

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

